


Käyttövinkit

Prolapsikuutiot


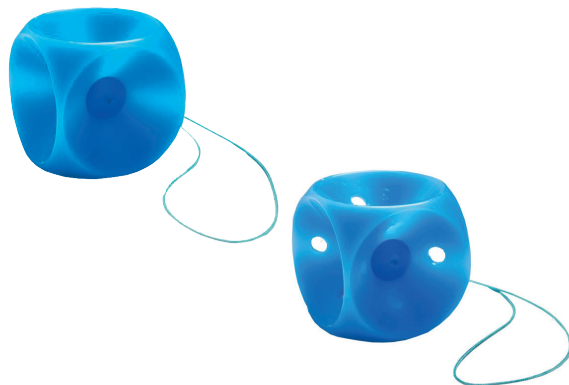


Ominaisuudet

- Eriasteisiin vaginan ja kohdun laskeumiin sekä virtsanpidätyskyvyn häiriöihin
- Sopii myös tilanteissa, joissa prolapsirengasta ei voida käyttää
- Materiaali silikonista
- 9 kokoa: 25 mm – 75 mm (koot 0 – 9)
- Suositellaan vaihtamaan 1 – 3 vuoden välein uuteen

Käyttö

- Oikea koko on edellytys onnistuneelle hoitotulokselle
- Prolapsikuutio asetetaan aamuisin ja poistetaan iltaisin. Näin ehkäistään vierasesineen aiheuttama ärsytys kuten lisääntynyt valkovuoto, verenvuoto tai haavaumat
- HUOM. Prolapsikuutiota voidaan pitää paikallaan myös useampia päiviä, mikäli prolapsikuutio ei aiheuta limakalvoärsytystä

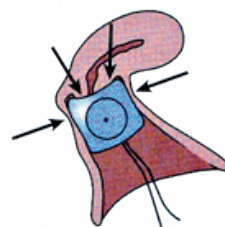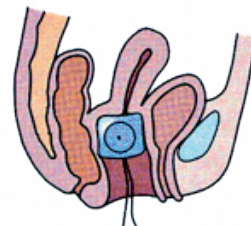

Paikoilleen asettaminen

- Liukasta kuutio vedellä tai voiteella
- Nosta jalka jakkaralle tai sängyn reunalle
- Purista kuutio kasaan kahden sormen väliin. Aseta kuutio puristettuna mahdollisimman ylös emättimeen, kuvan mukaisesti.
- Kuution voi tarvittaessa sivellä estrogeenivalmisteella ennen paikalleen asettamista

Poistaminen

- Purista kuutiota tai vie sormi kuution ja emättimen seinämän väliin, jolloin vakuumin vapautuu ja vasta tämän jälkeen vedä kuutio langoista varovasti ulos. HUOM. Älä vedä langoista, ennen kuin vakuumi on vapautettu!

Puhdistaminen käytön jälkeen

- Pestään juoksevilla vedellä
- Keittäminen tai sterilointi saattaa vaurioittaa materiaalia

Huomioita

- Lue käyttöohje huolella
- Mikäli tuotteen käytössä esiintyy ongelmia tai herää kysymyksiä, ole yhteydessä teitä hoitaneeseen yksikköön

Cube Pessary with button, Cube Pessary perforated with button. CE-merkitty lääkinällinen laite, CE 0482. Valmistaja: Dr.Arabin GmbH & Co. KG.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Tutustu tuotteen käyttöön liittyviin mahdollisiin varoituksiin.

Steripolar
Taking care further

Ota yhteyttä

steripolar@steripolar.fi

Asiakaspalvelu klo 8.00 – 16.00

Puhelin 09 417 606 00

steripolar.fi

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485